

ENKEL ...

- å programmere – alle parametre synlig under programmering
- å bære – et sofistikert bæresystem – Activ ryggsekk
- frihet – 40 timeres batteritid

TRYGG ...

- innovativ Ambix sikkerhetsklemme som forhindrer fri væskestrøm
- forskjellig nivå av tastaturlås
- med forskjellige alarmfunksjoner
- med integrert knekkbeskyttelse og knekkfri slange (ambulerende sett)

SIKKER ...

- liten og lett i vekt
- stille
- regulerbar alarmlyd
- med ramp og intermitterende program
- historie på infusjonsinnstillinger



Ytelse

- Nøyaktighet 5%
- 4 programmeringsinnstillinger, kontinuerlig, volum over tid, ramp, intermitterende infusjon
- Spesielt pumpesegment med integrert knekkbeskyttelse
- Opp- og nedstrøms okklusjons-detektor
- Pre-alarm når volum er infundert
- Funksjon for fylling av sett
- Meny for tilbakestilling av pumpen
- Regulerbar trykkgrense (nedstrøm)
- Regulerbar KVO-hastighet
- Regulerbart tidsintervall mellom to alarmer

Tekniske data

Nøyaktighet:	5% nominell
Infusjonsvolum:	0 – 9.999ml
Gitt volum:	0 – 9.999ml
Infusjons periode:	5 min – 24 t
Ramp up / ramp down:	0 min – 2t 30 min,
Dose:	5 min – 24 t
Antall intervaller:	1 – 24
Intervall tid:	10 min – 24 t
Hastighet:	10 – 600 ml/t
KVO hastighet:	0 – 10 ml/t
Størrelse:	132x120x45mm (pumpen) 146x162x115mm (holder)
Vekt:	550 g pumpe 500 g pumpeholder
Skjerm:	Customized LCD
Minne:	500 hendelser
Spenningskilde:	innbygd oppladbart batteri, NiMh4,8V, 1,8Ah
Batteritid:	5.000ml (40 timer på 125ml/t)
Nettstrøm:	100 – 230 V / 50 – 60 Hz

Ordreinformasjon

Ref.

Ambix <i>activ</i>	2892155
<i>activ</i> sett ambulerende	2892095
<i>activ</i> sett stasjonært	2892098
<i>activ</i> ryggsekk	2892091
<i>activ</i> ryggsekk mini	2892101

MEDISINSK UTSTYR

Ambix *activ*

DESIGNET FOR ET AKTIVT LIV!



ENKEL



SIKKER



BRUKERVENNLIG



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Ambix *activ*


DESIGNET FOR ET AKTIVT LIV

Ambix activ er en liten, lett bærbar pumpe designet for parenteral ernæring og anti-biotika-terapi.

Uansett hvilken parenteral ernæringsterapi som administreres, uansett hvor den brukes, Ambix activ er sikker, enkel, brukervennlig og gir deg bevegelsesfrihet.




Ambix a

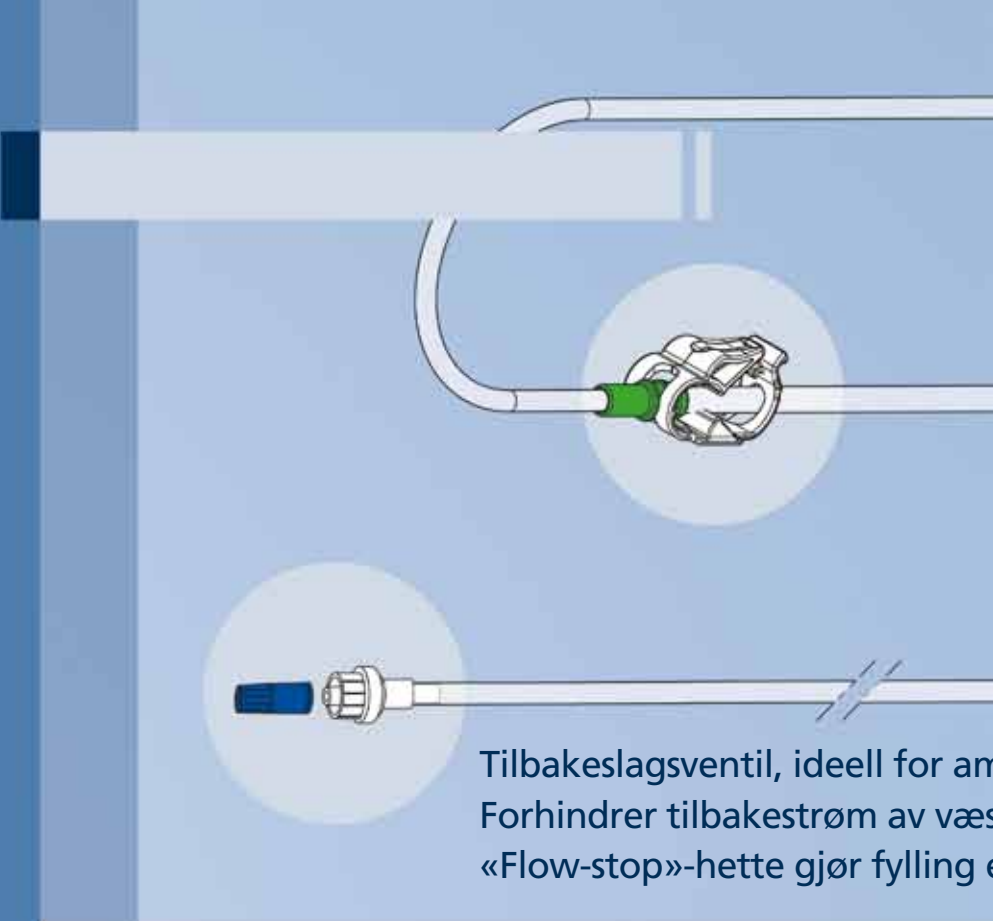


Activ
ryggsekk mini



Activ
ryggsekk

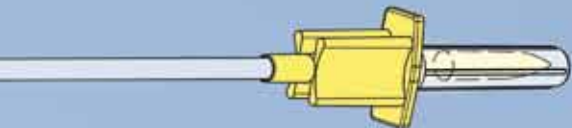

Ambix klemme, den nyeste generasjon av sikkerhetsklemme, som forhindrer fri væskestrøm.

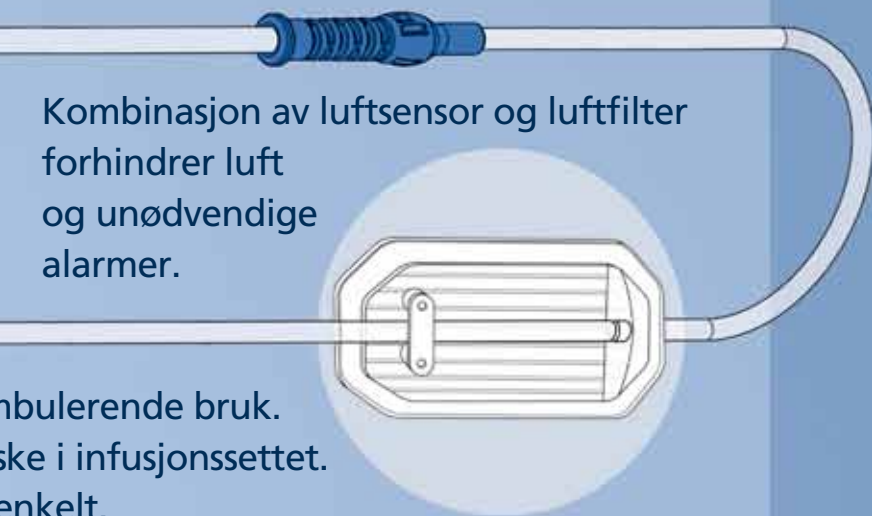

Kombinasjon av luftsensor og luftfilter forhindrer luft og unødvendige alarmer.

ambulerende bruk.
enkelte i infusjonssettet.
enkelt.

NY **ACTIV** RYGGSEKK MINI

- Lett og liten, designet for barn
- Egnet for infusjonsløsninger opp til 1,5 l
- Sikker og enkel montering av pumpen
- Regulerbare stropper gir komfortabel bæring for barn og voksne
- To forskjellige måter å bære ryggsekken på og en ekstra stropp for oppheng på barnevogn
- Frontvindu for tilgang til Ambix Activ uten å åpne sekken

SOFISTIKERT **ACTIV** RYGGSEKK FOR PARENTERAL ERNÆRING

- Robust og komfortabel
- Egnet for infusjonsløsninger for opp til 5 l
- Universalfester for infusjonsposer
- Sikker og enkel montering av pumpen
- Tre forskjellige måter å bære ryggsekken på
- Stor lomme foran for tilleggsutstyr og personlig bruk
- Frontvindu for tilgang til Ambix Activ uten å åpne sekken